


## Instruktionen zum Thema Grundlagen der Rettung und Bergung – Einbinden auf die Krankentrage –

Der folgende Arbeitsablauf beschreibt das Einbinden auf die Krankentrage.

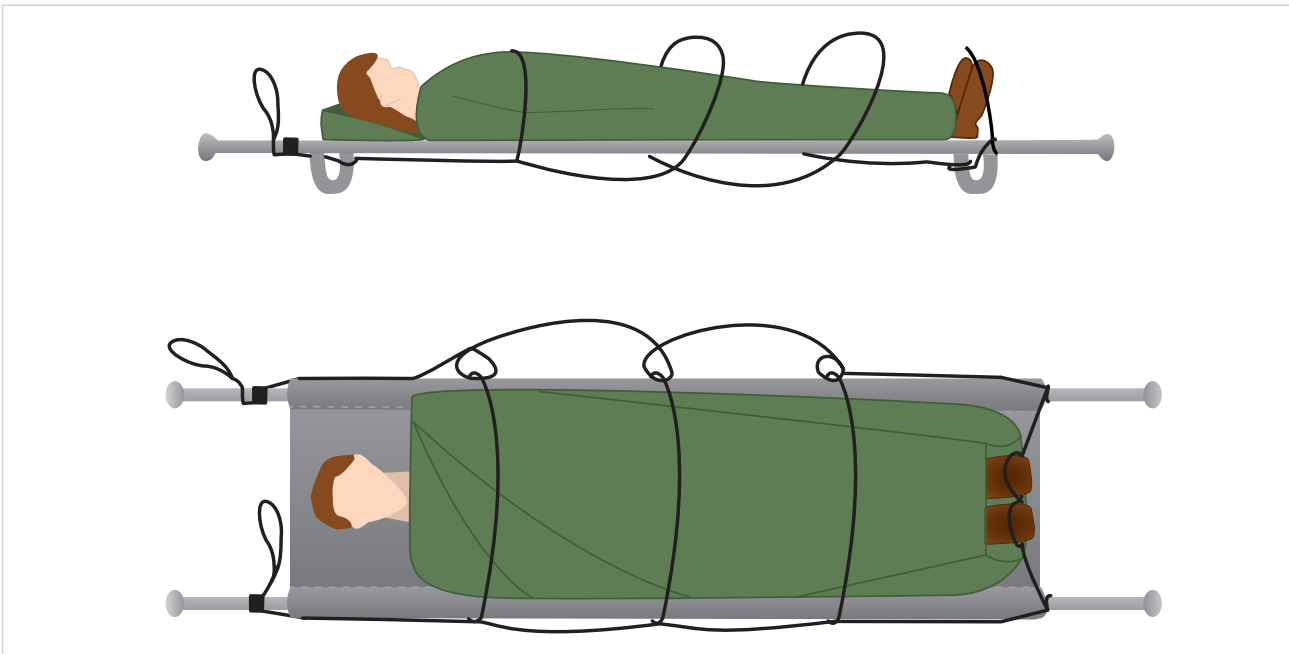

Folgen Sie den Instruktionsschritten zur Bearbeitung der Aufgabe:

### 1 Bereitlegen der Materialien

Die Krankentrage, Wolldecke und Arbeitsleinen (kurz) sind bereitzulegen.

### 2 Vorbereiten der Krankentrage

Die Krankentrage ist entsprechend aufzubauen. Eine Wolldecke wird schräg darüber ausgebreitet. Die Ecke am Kopfende wird eingeschlagen.

### 3 Auflegen und Sichern des Verletzten auf die Krankentrage

Die verletzte Person ist auf die vorbereitete Krankentrage aufzulegen. Diese wird mit den überstehenden Deckenteilen zugedeckt. Die Gurtbänder sind zu schließen und stramm zu ziehen.

### 4 Anschlagen der Arbeitsleine

Die Arbeitsleine (kurz) wird mit einem Mastwurf mit Halbschlag um einen kopfseitigen Tragegriff gelegt.

Als zusätzliche Sicherung wird die Arbeitsleine mit einem Halbschlag durch das darunter liegende Tragebein geführt.

### 5 Einbinden auf die Krankentrage

Oberhalb des Brustansatzes ist der erste Halbschlag zu legen. Der zweite und dritte Halbschlag wird oberhalb der Handgelenke bzw. oberhalb der Knie über den Körper des Verletzten gelegt.

Jeder Leinenschlag ist so zu fixieren, dass er unter dem Holm der Krankentrage zum Liegen kommt.

## 6 Fixieren und Verlängern der Arbeitsleine

Die Arbeitsleine ist mittels Halbschlägen am Tragegriff und Tragebein (Fußende) zu fixieren.

Die Arbeitsleine ist mit einem Doppelstich zu verlängern.

Der Achterschlag ist so um die Füße des Verletzten zu legen, dass das abgehende Leinenende unter der Sohlenwölbung (Steg) liegt.

Die Arbeitsleine ist mittels Halbschlägen am Tragegriff und Tragebein (gegenüberliegende Seite Fußende) zu fixieren.

## 7 Fixieren der Halbschläge

Die Halbschläge auf der gegenüberliegenden Seite werden um jeden Leinenschlag gelegt (jeden Schlag so fest anziehen, dass er unter dem Holm der Krankentrage zum Liegen kommt).

## 8 Festlegen der Arbeitsleine

Die Arbeitsleine ist am Tragebein mit einem Halbschlag zu sichern.

Das Leinenende wird mit einem Mastwurf und Halbschlag am kopfseitigen Tragegriff festgelegt.

## 9 Verstauen des freien Leinenendes

Das freie (restliche) Leinenende wird in die Kopftasche geschoben (vom Verletzungsmuster abhängig).



## Hinweis

- Eine Einsatzkraft verbleibt bei der verletzten Person und kommuniziert ständig mit dieser.

## Materialliste

| Verbrauchsmaterial | Menge |
|--------------------|-------|
|                    |       |
|                    |       |

| Material            | Menge |
|---------------------|-------|
| Krankentrage        | 1     |
| Wolldecke           | 1     |
| Arbeitsleine (kurz) | 2     |
|                     |       |
|                     |       |

| Werkzeug | Menge |
|----------|-------|
|          |       |
|          |       |