

# Instruktionen zum Thema

## Ablegen eines einfachen Einmalschutzanzug (Infektions- oder Schmutzschutzanzug)

Das Ablegen des Schutzanzuges erfolgt stets außerhalb des Gefahrenbereiches.

Insbesondere ist hierbei darauf zu achten, eine Verschleppung der Verschmutzung / Gefahrstoffe, und / oder eine Kontamination der Haut zu vermeiden.

Je nach Einsatzsituation (starke Verschmutzung des Anzugs, hohe Kontaminationsgefahr) sollte das Ablegen direkt in einem Müllsack stehend erfolgen.

### Folgen Sie den Instruktionsschritten zur Bearbeitung der Aufgabe:

#### 1 Einmalhandschuhe ablegen (erstes Paar)

Die Stulpe des äußeren Handschuhs greifen und leicht anheben. Das Handschuhende so umschlagen, dass die Innenseite der Stulpe außen liegt. Dann den Handschuh abstreifen.

Im zweiten Schritt mit der Hand an dem der saubere Handschuh sitzt, von innen in den anderen Handschuh greifen und anschließend von der Hand streifen. Die Handschuhe sind danach zu entsorgen.

Dies verhindert das Kontaminieren der Kleidung und eine Verschleppung der Gefahrstoffe.



#### 2 Schutzanzug ablegen

Reißverschluss komplett öffnen und von Innen in die Kapuze greifen. Kapuze von Innen so nach hinten ausziehen, dass die Kapuze auf links gedreht ist.



### 3 Ärmel

Mit einem Arm Innen in den anderen Ärmel greifen und linksherum gedreht ausziehen.

Anschließend die andere Seite des Anzugs ebenfalls nach außen drehend ausziehen.

Vorsicht: Beim Eingreifen in den Anzug darf der Ärmel nicht den Oberkörper berühren, Kontaminationsgefahr!



### 4 Hosenbeine

Hosenbeine von innen nach außen ausziehen, damit die Innenseite außen liegt.

Den Schutzanzug in einem dafür vorgesehenen Behälter/Sack entsorgen.



### 5 Reinigen/Desinfizieren

Einmalhandschuhe nun reinigen und mit einem geeigneten Desinfektionsmittel desinfizieren.

### 6 Schutzbrille/Korbbrille ablegen

Das Ablegen der Brille erfolgt analog des Instruktionblatts „Absetzen einer Korbbrille“ (Vorbeugen, Abnehmen). Kontaminierte Schutzbrille anschließend in einem dafür gekennzeichneten Behälter deponieren.



### 7 Atemschutzmaske ablegen


Das Ablegen der Brille erfolgt analog des Instruktionblatts „Ablegen einer FFP Maske“ (Vorbeugen, Abnehmen). Kontaminierte Maske anschließend in einem dafür vorgesehenen Behälter entsorgen.



## 8 Einmalhandschuhe ablegen (zweites Paar)

Die Stulpe des Handschuhs greifen und leicht anheben, ohne dabei die Haut zu berühren. Das Handschuhende so umschlagen, dass die Innenseite der Stulpe außen liegt. Dann den Handschuh abstreifen. Hierbei ebenfalls darauf achten, dass keine Haut berührt wird.

Im zweiten Schritt mit der sauberen Hand von innen in den anderen Handschuh greifen und anschließend von der Hand streifen. Die Handschuhe sind danach zu entsorgen.

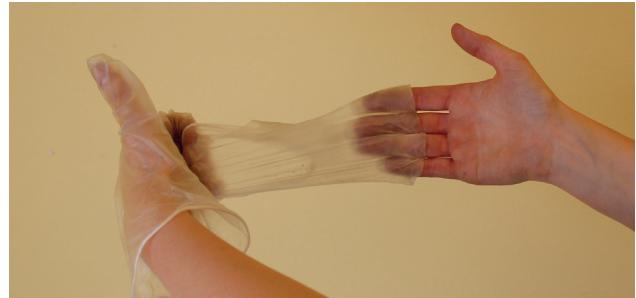

## Materialliste

Verbrauchsmaterial	Menge
Einmalschutzanzug	1 EA
Korbbrille / Schutzbrille	1 EA
Atemschutzmaske	
Einmalhandschuhe	

Spezialwerkzeug	Menge

Sonderausstattung	Menge